



Vorbereiding

Allereerst controle uitvoeren of de houdbaarheidsdatum van het fixatief in de container nog niet verlopen is.

Vul het aanvraagformulier voor Histologie in. Noteer op het aanvraagformulier: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en het Burgerservicenummer.

Op de container voorzien van fixatief Formaldehyde schrijft u de naam en geboortedatum (of gebruikt u de patiëntgegevenssticker).

LET OP:

- Indien u meerdere biopten neemt, dient u voor ieder biopt een potje met fixatief te gebruiken.
- Biopten < 5 mm worden niet gehalveerd. Geen uitspraak over radicaliteit
- Biopten > 5 mm worden gehalveerd. Radicaliteit kan beoordeeld worden.

Afname

STAP 1

Pas lokale anesthesie toe.

STAP 2

Noteer op het aanvraagformulier:

1. Relevante klinische informatie
2. Adequate klinische informatie
3. Vul het aanvraagformulier volledig in en noteer datum van afname

STAP 3

Spreid de huid loodrecht op huidlijnen (dan blijft na de biopsie een ellipsvormige afwijking over, die zich gemakkelijk laat hechten).

STAP 4

Biopteer door te draaien, met weinig druk, tot in het subcutane vet.

STAP 5

Verwijder de stans uit de huid.


Wip het biopt met een naaldje omhoog (met een pincet knijp je het preparaat fijn) en knip het biopt af onder het niveau van de dermis.

STAP 6

Doe het biopt in een potje voorzien van Formaldehyde en sluit het potje goed af.

STAP 7

Noteer de exacte locatie van de gebiopteerde lesie op het potje (voorkeur I, resp. II).

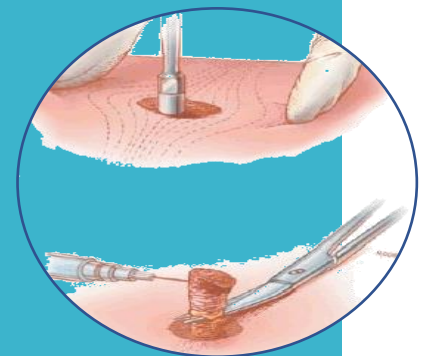

Transport naar het laboratorium

Plaats de container in het harde kunststof hoesje in de SafetyBag®, verwijder de witte strip van de blauwe band aan de bovenzijde van het zakje en plak het zakje goed dicht. Het materiaal verzenden d.m.v. de verzendenvolop naar Pathan vergezeld van een ingevuld aanvraagformulier met de nodige klinische gegevens.